


## СТАЦИОНАРНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ - SEDECAL MINIMAL VET-X

Ветеринарный рентгеновский аппарат со столом для минимального пространства.



Система без стресса для животных. Бесшумная. Мощность до 8 кВт обеспечивает четкие изображения без артефактов. На этот аппарат можно снимать самых разных животных с меньшим, чем у аналогов, временем экспозиции.

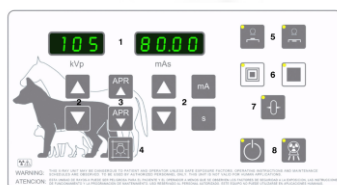

Рентгеновский излучатель Sedecal оснащён интуитивно понятной панелью управления, которая поддерживает общую идеологию аппарата - минимальные размеры и отличная маневренность.

**APR с 20 программами, "настраиваемыми пользователем"** под части тела и анатомию животных. Процесс изменения параметров (mAs и kVp) виден на дисплее. Все цифры автоматически отображаются «вверх ногами», если генератор повернут снизу вверх.

Полевая клиническая портативность с возможностью установки съемного генератора. Простое **снятие рентгеновского излучателя** для хранения или мобильного использования.

**Sedecal (Испания)** - единственный производитель, который привнёс в разработку ветеринарных рентгеновских аппаратов все те технологии, которые используются и для людей.



# Качественная Диагностика - гарантия доверия клиентов

Неправильно подобранное оборудование и недостаточно хорошая диагностика могут привести к увеличению летальных случаев домашних питомцев, что в свою очередь снижает доверие клиентов и приводит к уменьшению прибыли вашей клиники.

## УВЕЛИЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИКИ

Новый рентген аппарат Sedecal Minimal Vet позволяет получать более четкие и детализированные изображения, что обеспечивает более точную диагностику и, как следствие, повышение качества лечения.

## ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Новый рентген аппарат обеспечивает более быструю и эффективную процедуру получения изображения, что позволяет вам проводить больше исследований за короткий период времени и увеличивать оборот клиентов.

## ЭКОНОМИЯ НА ЗАТРАТАХ

Покупка нового рентген аппарата является инвестицией в будущее вашей клиники. Благодаря более высокой эффективности и точности, вы сможете экономить на затратах на повторные процедуры и лечение ошибочных диагнозов, что позволит увеличивать доход и прибыльность вашего бизнеса.

## Превосходное качество с минимальными усилиями: **SEDECAL MINIMAL VET-X**

### ПОРТАТИВНОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ

Требуемая площадь для установки всего 1,3 м<sup>2</sup>  
Возможность простого снятия рентгеновского излучателя для хранения или мобильного использования.

### УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Съемка нажатием педали освобождает руки ветеринара, обеспечивая комфорт и удобство при держании животного. Возможность делать снимки с косым (наклонным) входом луча в тело пациента. Наличие лазерного указателя помогает точно определить позицию съемки.

### НАСТРОЙКИ И ФУНКЦИИ

20 режимов запоминания настроек позволяют сохранить предпочтительные параметры съемки, экономя время в будущем. Возможность делать снимки с очень маленькой выдержкой (1/1000 секунды) обеспечивает высокую четкость и детализацию изображений.

### ТОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Плавающий стол с механическим тормозом обеспечивает движение в двух направлениях, упрощая позиционирование животного. Подвижная стойка с излучателем позволяет перемещать аппарат без необходимости перемещать стол, снижая требования к размеру помещения.



# Технические характеристики SEDECAL MINIMAL VET-X

Технические характеристики	
Страна производства	Испания
Площадь для установки	1,3 м <sup>2</sup>
Фиксированная фокальная дистанция	100 см
Перемещение кассетоприемника синхронизировано с перемещением излучателя	Да
Стол	плавает в двух направлениях
Рентгеновский генератор	8,0 кВт. Достаточно, чтобы делать снимки как мелких, так и крупных (включая лошадей) животных.
Тип генератора	Высокочастотный 300 kHz
Максимальная сила тока	100 мА
Максимальное время экспозиции (миллиампер в секунду)	250 mAs
Частота	300 kHz
Два фокусных пятна	0,6/2,8 мм
Время экспозиции	0,001 - 10 сек.
Электропитание	1 фаза, 220-240В, 50/60 Гц
Габариты	Длина стола - 1404 мм Ширина стола - 940,5 мм (+ минимум 100 мм для подстольного рычага управления) Высота - 2033 мм Диапазон перемещения рентгеновского излучателя вдоль стола - 690 мм

## ОПЛАТА

Оплата продукции производится за наличный и безналичный расчёт. Наши менеджеры предложат Вам самые гибкие условия оплаты, варианты рассрочки и лизинга, помогут оформить все необходимые документы.



# Сервисные услуги в комплекте с рентген-аппаратом SEDECAL MINIMAL VET-X

Получите максимум от вашего нового рентген аппарата с нашими сервисными услугами.



## Установка, настройка и запуск

Мы берем на себя полную установку и настройку вашего нового рентген аппарата SEDECAL MINIMAL VET-X. Наша команда техников профессионально установит оборудование и проведет полную настройку, чтобы вы могли начать использовать его сразу после установки.



## Обучение сотрудников работе на оборудовании

Мы предлагаем полное обучение вашего персонала работе на новом рентген аппарате, чтобы вы могли использовать его на 100%. Наша команда квалифицированных специалистов проведет практические занятия, которые помогут вашим сотрудникам быстро освоиться с новым оборудованием.



## Техническое гарантийное обслуживание

Мы предоставляем полное техническое обслуживание, которое включает в себя регулярную профилактику и ремонт оборудования, если это потребуется. Мы сделаем все возможное, чтобы ваш рентген аппарат работал бесперебойно на протяжении всего его срока службы.



## ЗАО «ТЕХНО-МЕД» - это:

- 32 год успешной работы на российском рынке медицинских товаров
- всегда большой ассортимент товаров на складе
- дистрибьюторские соглашения с поставщиками
- высокое качество товаров, гарантии
- наличие всех необходимых разрешений и сертификатов
- конкурентоспособные цены
- ценовая и рекламная поддержка дилеров
- авторизованное гарантийное и сервисное обслуживание
- бесплатная доставка в пределах Санкт-Петербурга
- доставка по России и СНГ, в т.ч. таможенное оформление.

[www.techno-med.ru](http://www.techno-med.ru)  
(812) 333-0-331, (495) 225-76-46

